


Motic Images Plus 2.0

Savybės:

1. Skirta kontroliuoti Moticam serijos kameras;
2. Naujausia versija gali kontroliuoti Canon skaitmeninius veidrodinius fotoaparatus, turinčius live wiew funkciją.
3. Fotografuoti galima tiek pavienius vaizdus tiek atlikti TimeLapse objekto fotografavimą, su minimalių vienos sekundės intervalu.
4. Esant moticam cameroms galima filmuoti kintamu greičiu, priklausomai nuo kameros galimybių.
5. Esant sukalibruotiems komkretaus mikroskopo objektyvams sistema gali atlikti matavimo operacijas. SFC formato bylose išlieka visi matavimo rezultatai, todėl visuomet galima patikrinti savo paties ar kito žmogaus atliktus matavimus.

Viršutinėje programos lango dalyje yra valdymo skydas

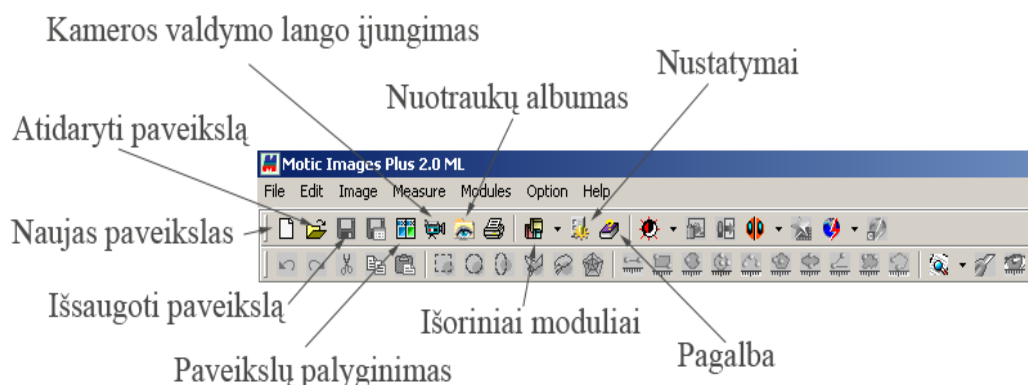

Valdymo ikonų reikšmės:

1. Naujo lango atidarymo ikona atidaro naują langą vaizdui sukurti. Tai standartinė funkcija esanti bet kurioje rastrinės grafikos programoje. Fotografuojant arba filmuojant šios ikonos nuspusti nereikia.
2. Atidaryti paveikslą. Paveikslo atidarymo ikona skirta atidaryti esamam paveiksliui, tolimesniam jo apdorojimui arba matavimų atlikimui.
3. Išsaugoti paveikslą. Išsaugo visą projektą, su visais matavimais (skaitinės vertės išlieka tik esant sfc bylai).
4. Paveikslų palyginimas. Atlieka dviejų paveiklų palyginimą. Netinka filmuotai medžiagai.
5. Įjungiamas kameros knrolės langas.
6. Nuotraukų albumas. Ši opcija leidžia peržvelgti ir išsiimti visas nufotografuotas nuotraukas

vienu veiksmu. Netinka filmuotai medžiagai.

7. Nustatymai. Atidaro nustatymų langą.
8. Pagalba. Atidaro integruotą pagalbą.